


לא ניתן להפעיל או להדליק את המכשיר

הוראות שימוש אקדח עיסוי 4 ראשים

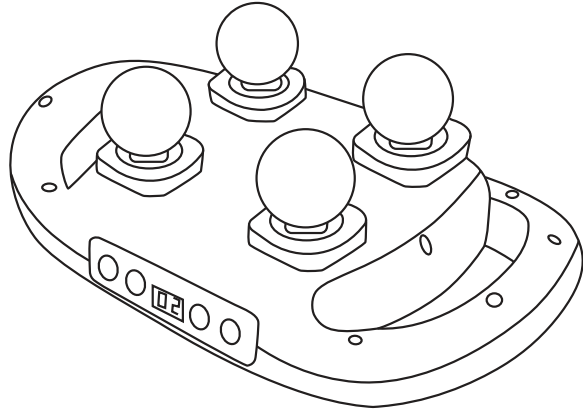

דגם המוצר: Q4

שם המוצר: אקדח מסאז' ארבעה ראשים

הספק קלט נמדד: 10W

הספק עבודה: 22W

קיבולת סוללה: 2000mAh

מתח טעינה נמדד: 5V

מתח עבודה: 11.1V

משקל נטו/ברוטו: 1.10 / 1.54 ק"ג

למשתמש היקר

תודה שבחרת במוצר שלנו. אקדח העיסוי Q4 תוכנן בקפידה כמכשיר איכותי לשימוש ביתי. אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדריך לפני השימוש, על מנת להפיק את המרב מהטיפול ולשמור על שימוש בטוח ונכון. החברה שלנו עומדת לרשותך עם שירות מלא ותמיכה מקצועית. ייתכנו שינויים בין המוצר שקיבלת לבין התיאורים במדריך זה, וזאת בשל שיפורים מתמשכים - אנו מתנצלים מראש על כל אי-התאמות אפשריות.

אזהרות ושימוש נכון

- לפני תחילת השימוש, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:
- אנשים הסובלים מטרומבוזיה ורידית, היסטוריה של שבץ מוחי או התקף לב - לא להשתמש במכשיר. רטט עלול להוות סיכון לשחרור קרישי דם.
- אנשים מבוגרים, חלשים או עם בעיות לב וכלי דם חמורות - להתחיל בעוצמה נמוכה ולהעלות בהדרגה תוך מעקב אחר תחושת הנוחות.

סיבה 1: טמפרטורה נמוכה

אם המכשיר נשמר בסביבה מתחת ל-15 מעלות צלזיוס למשך זמן ממושך, פעילות הסוללה עלולה להיחלש ולמנוע הדלקה תקינה. המכשיר עשוי להיראות פועל אך לא יתפקד כראוי.
פתרון: יש לאפשר למכשיר לשהות בסביבה מעל 0 מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפחות, או להשתמש במייבש שיער כדי להעלות את טמפרטורת המכשיר במהירות.

סיבה 2: רמת סוללה נמוכה

כאשר הסוללה חלשה ולא נטענה במשך זמן רב, היא עלולה להיכנס למצב הגנה. במצב זה המכשיר לא יעבוד כראוי גם אם מופעל.
פתרון: יש לכבות את המכשיר, לחבר את המטען, לוודא שהסוללה טעונה במלואה ורק אז לנסות להפעיל שוב.

פתרון תקלות

בעיה: המוצר אינו עובד

פתרון: יש לוודא שהסוללה טעונה במלואה. מומלץ להשתמש במכשיר רק לאחר טעינה מלאה.

בעיה: רעשים חריגים קלים בזמן שימוש

פתרון: בתקופת השימוש הראשונית ייתכנו רעשים קלים לא שגרתיים - הדבר נחשב נורמלי. אם מופיעים רעשים חזקים ומשמעותיים - יש לשלוח את המכשיר לבדיקה.

בעיה: הסוללה אינה נטענת

פתרון: ייתכן שהסוללה ישנה או שמגעי החיבור שלה חלשים. במקרה כזה יש לפנות לשירות לקוחות או לאנשי המכירות.

פירוק סוללה

נתק את ספק הכוח החיצוני והסר את כיסוי המוצר.

נתק את המכשיר מהחשמל.

פרק את הסוללה.


השלך את הסוללה בנקודת איסוף מוסמכת למחזור.

יש להקפיד על חוקים מקומיים להגנה סביבתית והנחיות לפינוי סוללות.

חשוב: אנשים ללא הכשרה מקצועית - אינם רשאים לנסות לפרק את הסוללה!

- לניקוי יומיומי - להשתמש בחומר ניקוי עדין ובבד רך. אין להשתמש בשמנים, ממיסים אורגניים או כימיקלים, ואין להשרות במים.
- בתום שימוש או ניקוי - חובה לכבות את המכשיר.
- בזמן הובלה - יש להגן על המכשיר מפני רעידות, מכות או נפילות.

הוראות שימוש

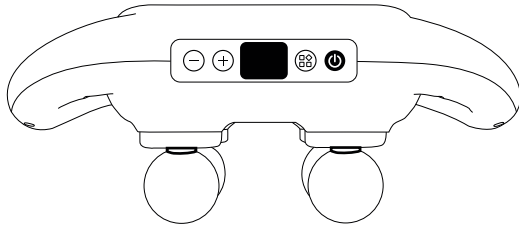

כפתורים ותצוגה:

1. כפתור הפעלה/כיבוי
 - לחיצה ארוכה: מפעיל או מכבה את המכשיר. בעת ההפעלה מוצגת ברירת מחדל של 10 דקות.
 - לחיצה קצרה: במצב הפעלה, מאפשר לקבוע זמן עבודה של 10, 20 או 30 דקות. בשאר המצבים הכפתורים אינם פעילים. המסך יציג: 10-20-30.
 2. כפתור מצב [Mode]
 - לחיצה קצרה: במצב הפעלה ניתן לבחור בין 6 מצבים [P1-P2-P3-P4-P5-P6]. בשאר המצבים הכפתורים אינם פעילים. המסך יציג את בחירת המצב [P1-P2-P3-P4-P5-P6] למשך 2 שניות, ולאחר מכן יחזור להצגת ספירת הזמן.
 3. כפתור פלוס [+]
 - לחיצה קצרה: במצב הפעלה מעלה את עוצמת העיסוי ברמה אחת בכל לחיצה, עד למקסימום של 20 רמות. התצוגה מראה את רמת העוצמה [1-20], ולאחר 2 שניות חוזרת להצגת ספירת הזמן.
 4. כפתור מינוס [-]
 - לחיצה קצרה: במצב הפעלה מוריד את עוצמת העיסוי ברמה אחת בכל לחיצה, עד למינימום של רמה 1. התצוגה מראה את רמת העוצמה [1-20], ולאחר 2 שניות חוזרת להצגת ספירת הזמן.
- תזכורת טעינה:
- נורית החיווי מהבהבת בזמן טעינה ונשארת דולקת באופן רציף כשהסוללה טעונה במלואה.

- המכשיר מיועד להרפיית שרירים בלבד ואינו בעל השפעה להרזיה. אין להשתמש בו על איברים פנימיים (כגון בטן) כדי למנוע נזק.
- מומלץ להשתמש מעל בגדים, ולהחליף מיקום עיסוי כל 20-30 שניות למניעת התחממות יתר במגע ישיר עם העור.
- להימנע משימוש באזורים רגישים - עצמות, מפרקים, ראש ועמוד שדרה. לחץ עודף עלול לגרום לסחרחורת או חוסר נוחות.
- כאשר המכשיר מונח ולא מוחזק ביד - יש להניחו על משטח רך (מיטה/ספה). בעת עיסוי שוק - להניח כרית מתחת לרגליים, ובעת עיסוי ירך - כרית מתחת לברך. כך הלחץ יתפזר בצורה נכונה ותובטח נוחות.
- במקרה של אי-נוחות - יש להפסיק שימוש ולפנות לרופא.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או משמיע רעשים חריגים.
- אין להשתמש בידיים רטובות או בסביבת מים (מטבח/חדר רחצה).
- יש לוודא שפתחי האוורור נשארים פתוחים על מנת לשמור על זרימת אוויר תקינה
- אנשים עם קוצבי לב, דפיברילטורים או צנתרים ורידיים מרכזיים - אינם רשאים להשתמש במכשיר.
- אנשים הסובלים ממחלות זיהומיות, חום גבוה מתמשך, דלקות עצם או מפרקים, כאבי בטן חריפים, מחלות עור זיהומיות, סוכרת חמורה, שברים או טראומה - אינם רשאים להשתמש במכשיר.
- ילדים מתחת לגיל 6 - אסורים בשימוש. בני 6-18 - רק תחת השגחת מבוגר.
- אנשים עם בעיות קרישה (כגון טרומבוציטופניה) - אינם רשאים להשתמש במכשיר. המוצר אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי. במקרה של כאבים, טיפולים רפואיים או שימוש במכשירים נוספים - חובה להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
- יש לוודא לפני השימוש כי מתח החשמל תואם את דרישות המכשיר, ושהתקע מחובר היטב לשקע.
- אין להכניס את המכשיר למים. במקרה של חדירת נוזלים - יש לפנות לבדיקה מקצועית בהקדם.
- יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום או אש.
- יש להשתמש אך ורק במטען, בכבל ובתקע המקוריים.
- אין להפיל את המכשיר.
- אין לפרק או לנסות לפתוח את המכשיר.
- אין לחסום את פתח הפייה או לאפשר כניסת חלקיקים.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או משמיע קולות חריגים.
- אין להשתמש בידיים רטובות או בקרבת מקורות מים (מטבח/חדר רחצה).
- אין להפעיל לחץ מופרז או לחסום את פתח הפייה.
- במקרה של כבל חשמל או תקע פגום - אין לנסות לתקן עצמאית. יש לפנות לספק או לשירות הלקוחות המורשה.

ניקוי ותחזוקה

- אזהרה: לפני כל פעולת תחזוקה או ניקוי - יש לכבות את המכשיר ולנתק מהחשמל.
- באחסון ממושך - יש לשמור את המכשיר טעון חלקית, לכבותו, ולאחסן באריזתו המקורית במקום יבש, מאוורר וקריר.
- באחסון ארוך טווח - מומלץ להטעין את המכשיר אחת לחצי שנה כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.