


הוראות שימוש אקדח עיסוי 8 ראשים



- דגם המוצר: S6
- שם המוצר: אקדח מסאז' שמונה ראשים
- הספק: 30W / 35W (בהתאם לדגם)
 - מתח טעינה: 5V
 - זרם טעינה: 2A
 - מתח סוללה: 7.4V / 11.1V
 - טווח עוצמות: 1-30 רמות
 - זמן פעולה: עד 15 דקות למחזור עבודה
 - טעינה מלאה: כ־3 שעות

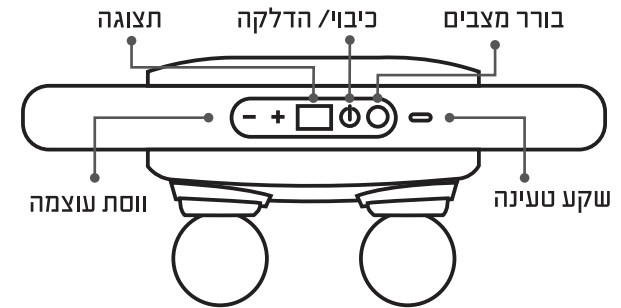

הפעלה וכיבוי

1. **הדלקה:** לחצו על כפתור ההפעלה [⏻]. תוצג על המסך הספרה "00".
- לחיצה קצרה על כפתור ההגברה תתחיל את פעולת המכשיר.

כיבוי: לחצו על כפתור ההפעלה [⏻] שוב כדי לעצור את פעולת המכשיר.

- החלפת מצבים: לאחר ההפעלה, לחצו על כפתור ה־Mode כדי לעבור בין שלושת המצבים: F1, F2, F3 - כל מצב מתאים לסוג עיסוי שונה (עדין, בינוני, עמוק).

ויסות עוצמה:

- לחיצה ארוכה על כפתור "+" - העלאה מהירה של העוצמה.
- לחיצה קצרה על "+" - העלאת עוצמה הדרגתית ברמות 1-30.
- לחיצה ארוכה על כפתור "-" - הורדה מהירה של העוצמה.
- לחיצה קצרה על "-" - הורדת עוצמה הדרגתית ברמות 1-30.
- הערה: המכשיר נכבה אוטומטית לאחר 15 דקות עבודה. להפעלה מחודשת - יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ההפעלה.

למשתמש היקר

- תודה שבחרת במוצר שלנו. אקדח העיסוי S6 תוכנן בקפידה כמכשיר איכותי לשימוש ביתי. אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדריך לפני השימוש, על מנת להפיק את המרב מהטיפול ולשמור על שימוש בטוח ונכון. החברה שלנו עומדת לרשותך עם שירות מלא ותמיכה מקצועית.
- ייתכנו שינויים בין המוצר שקיבלת לבין התיאורים במדריך זה, וזאת בשל שיפורים מתמשכים - אנו מתנצלים מראש על כל אי-התאמות אפשריות.

אזהרות ושימוש נכון

- לפני תחילת השימוש, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:
- אנשים הסובלים מטרומבозה ורידית, היסטוריה של שבץ מוחי או התקף לב - לא להשתמש במכשיר. רטט עלול להוות סיכון לשחרור קרישי דם.
- אנשים מבוגרים, חלשים או עם בעיות לב וכלי דם חמורות - להתחיל בעוצמה נמוכה ולהעלות בהדרגה תוך מעקב אחר תחושת הנוחות.
- המכשיר מיועד להרפיית שרירים בלבד ואינו בעל השפעה להרזיה. אין להשתמש בו על איברים פנימיים (כגון בטן) כדי למנוע נזק.
- מומלץ להשתמש מעל בגדים, ולהחליף מיקום עיסוי כל 20-30 שניות למניעת התחממות יתר במגע ישיר עם העור.
- להימנע משימוש באזורים רגישים - עצמות, מפרקים, ראש ועמוד שדרה. לחץ עודף עלול לגרום לסחרחורת או חוסר נוחות.
- כאשר המכשיר מונח ולא מוחזק ביד - יש להניחו על משטח רך (מיטה/ספה). בעת עיסוי שוק - להניח כרית מתחת לרגליים, ובעת עיסוי ירך - כרית מתחת לברך. כך הלחץ יתפזר בצורה נכונה ותובטח נוחות.
- במקרה של אי-נוחות - יש להפסיק שימוש ולפנות לרופא.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או משמיע רעשים חריגים.
- אין להשתמש בידיים רטובות או בסביבת מים (מטבח/חדר רחצה).
- יש לוודא שפתחי האוויר נשארים פתוחים על מנת לשמור על זרימת אוויר תקינה
- אנשים עם קוצבי לב, דפיברילטורים או צנתרים ורידיים מרכזיים - אינם רשאים להשתמש במכשיר.
- אנשים הסובלים ממחלות זיהומיות, חום גבוה מתמשך, דלקות עצם או מפרקים, כאבי בטן חריפים, מחלות עור זיהומיות, סוכרת חמורה, שברים או טראומה - אינם רשאים להשתמש במכשיר.
- ילדים מתחת לגיל 6 - אסורים בשימוש. בני 6-18 - רק תחת השגחת מבוגר.
- אנשים עם בעיות קרישה (כגון טרומבוציטופניה) - אינם רשאים להשתמש במכשיר. המוצר אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי. במקרה של כאבים, טיפולים רפואיים או שימוש במכשירים נוספים - חובה להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
- יש לוודא לפני השימוש כי מתח החשמל תואם את דרישות המכשיר, ושהתקע מחובר היטב לשקע.
- אין להכניס את המכשיר למים. במקרה של חדירת נוזלים - יש לפנות לבדיקה מקצועית בהקדם.

- יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום או אש.
- יש להשתמש אך ורק במטען, בכבל ובתקע המקוריים.
- אין להפיל את המכשיר.
- אין לפרק או לנסות לפתוח את המכשיר.
- אין לחסום את פתח הפייה או לאפשר כניסת חלקיקים.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או משמיע קולות חריגים.
- אין להשתמש בידיים רטובות או בקרבת מקורות מים (מטבח/חדר רחצה).
- אין להפעיל לחץ מופרז או לחסום את פתח הפייה.
- במקרה של כבל חשמל או תקע פגום - אין לנסות לתקן עצמאית. יש לפנות לספק או לשירות הלקוחות המורשה.

ניקוי ותחזוקה

- אזהרה: לפני כל פעולת תחזוקה או ניקוי - יש לכבות את המכשיר ולנתק מהחשמל.
- באחסון ממושך - יש לשמור את המכשיר טעון חלקית, לכבותו, ולאחסן באריזתו המקורית במקום יבש, מאוורר וקריר.
- באחסון ארוך טווח - מומלץ להטעין את המכשיר אחת לחצי שנה כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.
- לניקוי יומיומי - להשתמש בחומר ניקוי עדין ובבד רך. אין להשתמש בשמנים, ממיסים אורגניים או כימיקלים, ואין להשרות במים.
- בתום שימוש או ניקוי - חובה לכבות את המכשיר.
- בזמן הובלה - יש להגן על המכשיר מפני רעידות, מכות או נפילות.

הנחיות בטיחות

- אין להשתמש במכשיר אם מותקן קוצב לב, דפיברילטור או צנתר ורידי.
- אין להשתמש במכשיר בקרב אנשים הסובלים ממחלות עור, פצעים פתוחים, חום גבוה, דלקות, שברים או מחלות כרוניות קשות.
- אין להשתמש בזמן היריון או הנקה אלא בהנחיית מטפל מוסמך.
- אם אתם חשים כאב, אי-נוחות או סחרחורת - הפסיקו את השימוש ופנו לייעוץ רפואי.
- אין להפעיל לחץ חזק מדי על הגוף - תנו למשקל המכשיר לעבוד בעדינות על האזור.

מפרט טכני עיקרי

- הספק: 35W / 30W (בהתאם לדגם)
- מתח טעינה: 5V
- זרם טעינה: 2A
- מתח סוללה: 7.4V / 11.1V
- טווח עוצמות: 1-30 רמות
- זמן פעולה: עד 15 דקות למחזור עבודה
- טעינה מלאה: כ-3 שעות